


PANEL SUSPENDIDO CEILING MOUNTED BEDHEAD PANEL PS-1001

Se trata de un sistema dinámico para apoyo, abastecimiento y organización; especialmente diseñado a áreas de alta complejidad donde se utilizan un gran número de equipos para control y tratamiento.

A dynamic system for support, supply and organization; specially designed for high complexity areas where much control and treatment equipment is used.

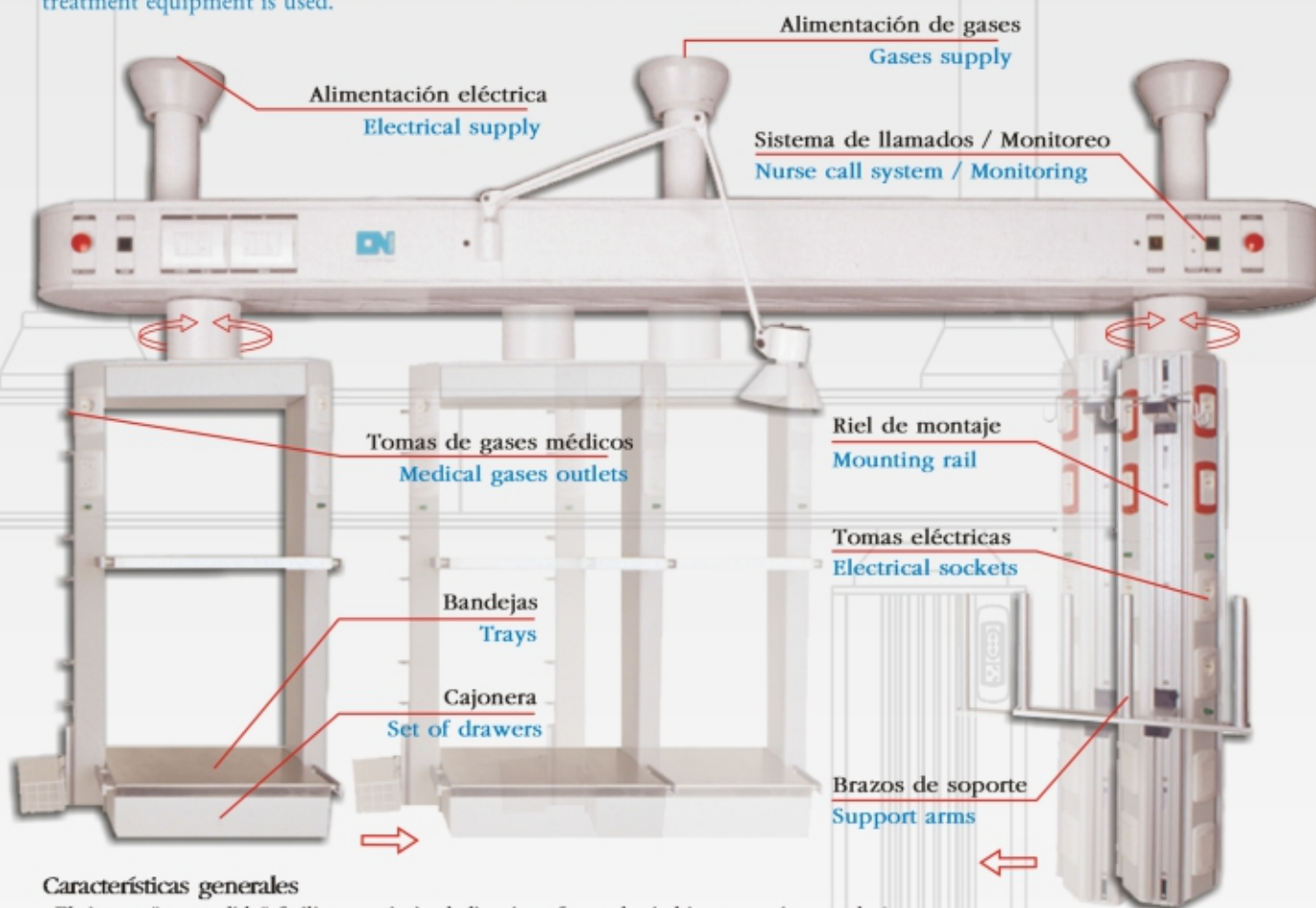

Características generales

- El sistema "suspendido" facilita y optimiza la limpieza, factor de vital importancia en toda área crítica.
- Queda liberado todo el espacio que circunda al paciente, de modo tal que el cuerpo médico y de enfermería puede desplazarse con comodidad en torno al mismo.
- Evita tropiezos con cables y mangueras.
- De fácil manipulación lo que implica un menor esfuerzo.

Especificaciones Técnicas

- Un riel en la cara inferior de la estructura fija permite el movimiento horizontal de las consolas de abastecimiento.
- Otro movimiento, giratorio sobre su propio eje, permite orientar la consola hacia el paciente.
- Un sistema de freno neumático hace posible fijarlos en cualquier parte del riel.
- Las bandejas son construidas totalmente en acero inoxidable.
- La capacidad de carga por bandeja es de 50 kg.

General Characteristics

- The "hovering" system facilitates and optimizes cleaning, vital importance issue in any critical area.
- All space surrounding the patient is freed, in such a way that the medical and nursing team is able to comfortably move around the patient.
- Avoids stumbling with wires and hoses
- Easy to manipulate thus implying lesser efforts.

Technical Features

- A rail in the interior face of the fixed structure, allows horizontal movement of "supply consoles".
- Another movement (revolvable on its own axis), facilitates changes in the console front position (to the patient).

