



the difference is clear

Vitalograph micro

Espirómetro de bolsillo con informes de espirometría para PC


- Evaluación con respiración única de FVC, FEV₁, Rel. FEV₁, PEF
- Incluye el software 'Vitalograph Reports' de PC para crear informes en PDF
- Los informes incluyen curvas f/v y v/t con calidad de prueba, valores de predicción e interpretación
- Parámetros FVC, FEV₁, Relación FEV₁, PEF, FEV₆, PEF, FEF₂₅, FEF₅₀, FEF₇₅, FEF₂₅₋₇₅
- Robusto pero de bajo costo, con funciones de calibración y verificación de precisión muy estables
- Utilizados por: médicos clínicos, alergistas, anestesistas, medicina laboral, muestreos en serie y más
- Tecnología de estado sólido tipo Fleisch sin partes móviles
- Probado y certificado bajo las normas de espirometría ATS/ERS:2005
- Utiliza piezas bucales SafeTway de tamaño estandarizado para una higiene asegurada
- Sensor de flujo con tecnología Fleisch que brinda baja presión de retroceso
- Pantalla de cristal líquido de alta visibilidad con números e iconos grandes

Vitalograph es líder mundial en brindar equipos de diagnóstico respiratorio de excelente calidad, servicios de pruebas clínicas y servicios de equipos médicos. Con la herencia de medio siglo en ser pioneros en la excelencia, Vitalograph continúa realizando valiosas contribuciones para un cuidado médico efectivo y una mejor calidad de vida.





the difference is clear

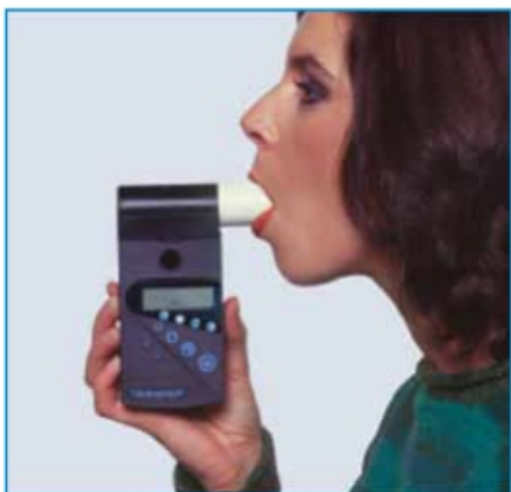

UK Sales

Vitalograph Ltd.

Maids Moreton Buckingham MK18 1SW England

Tel: 01280 827110 Fax: 01280 823302

e-mail: sales@vitalograph.co.uk www.vitalograph.co.uk

Export Sales

Vitalograph Ltd.

Maids Moreton Buckingham

MK18 1SW England

Tel: +44 1280 827120

Fax: +44 1280 823302

e-mail: sales@vitalograph.co.uk

www.vitalograph.eu

Vitalograph GmbH

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg

Germany

Tel: (040) 547391-0

Fax: (040) 547391-40

e-mail: info@vitalograph.de

www.vitalograph.de

Vitalograph Inc.

13310 West 99th Street

Lenexa

Kansas 66215 USA

Tel: (913) 888 4221

Fax: (913) 888 4259

e-mail: vitcs@vitalograph.com

www.vitalograph.com

Vitalograph (Ireland) Ltd.

Gort Road Business Park

Ennis

Co Clare Ireland

Tel: (065) 6864100

Fax: (065) 6829289

e-mail: sales@vitalograph.ie

www.vitalograph.ie

Especificaciones Técnicas:

Producto: Micro

Número de Modelo: 6300

Parámetros Mostrados:

FVC, FEV₁, Rel. FEV₁, PEF

Parámetros en Informe: FVC, FEV₁, Rel.

FEV₁, PEF, FEV₆, PEF, FEF₂₅, FEF₅₀, FEF₇₅, FEF₂₅₋₇₅

Temperatura de Operación:

Límites ATS/ERS: 17 - 37°C,

Límites de Diseño: 10 - 40°C

Batería:

PP3 reemplazable por el usuario

Vida útil de 400 pruebas

Apagado automático luego de 2 min de presionar la última tecla

Principio de Medición:

Neumotacógrafo Fleisch de estado sólido tamaño N°2

Precisión:

Mejor que +/-3% en volúmenes

Rango: 0 - 9.99 L BTPS

Impedancia al Flujo:

Mejor que 0.15 kPa/ L/s a 14 L/s incluyendo SafeTway

Pantalla: Cristal Líquido Común

Tamaño: 145 x 70 x 40mm

Peso: 165 grs

Normas de Performance:

ISO 26782:2009, ISO 23747:2007

ATS/ERS:2005

Normas de Seguridad:

EN ISO 60601-1:2005

Normas de Seguridad Médica:

Directiva de Equipos Médicos

2007/47/EC

Diseñado y Fabricado Bajo:

ISO 13485:2003, FDA 21CFR820, CMDR

Información para Pedidos:

- 63000** 6300 Micro incluye software PC y cable de serie
- 20242** 2024 Piezas Bucales SafeTway® (200)
- 20980** 2024 Piezas Bucales mini SafeTway® (50)
- 20303** 2030 Broches para nariz descartables (200)
- 36020** 2040 Jeringa de Precisión de 3-L
- 63054** Tarjetas de registro de espirometría de Serie (6 x 50)
- 63052** Pequeña bolsa acolchada de transporte
- 14002** Entrenamiento de Operador de Medio Día

