


ISLA DE NEONATOLOGIA

NEONATAL WORKSTATION

ISLA

Sistema combinado de apoyo, abastecimiento y organización con un frente para 1 o 2 puestos de trabajo. Puede instalarse montado contra un muro o en forma de isla tomada de piso y techo. (posibilitando hasta 4 puestos).

Support, supply and organization combined system provided with a front for two workstations. It can be installed on the wall or as an island mounted from the floor and ceiling. (thus enabling up to four positions).

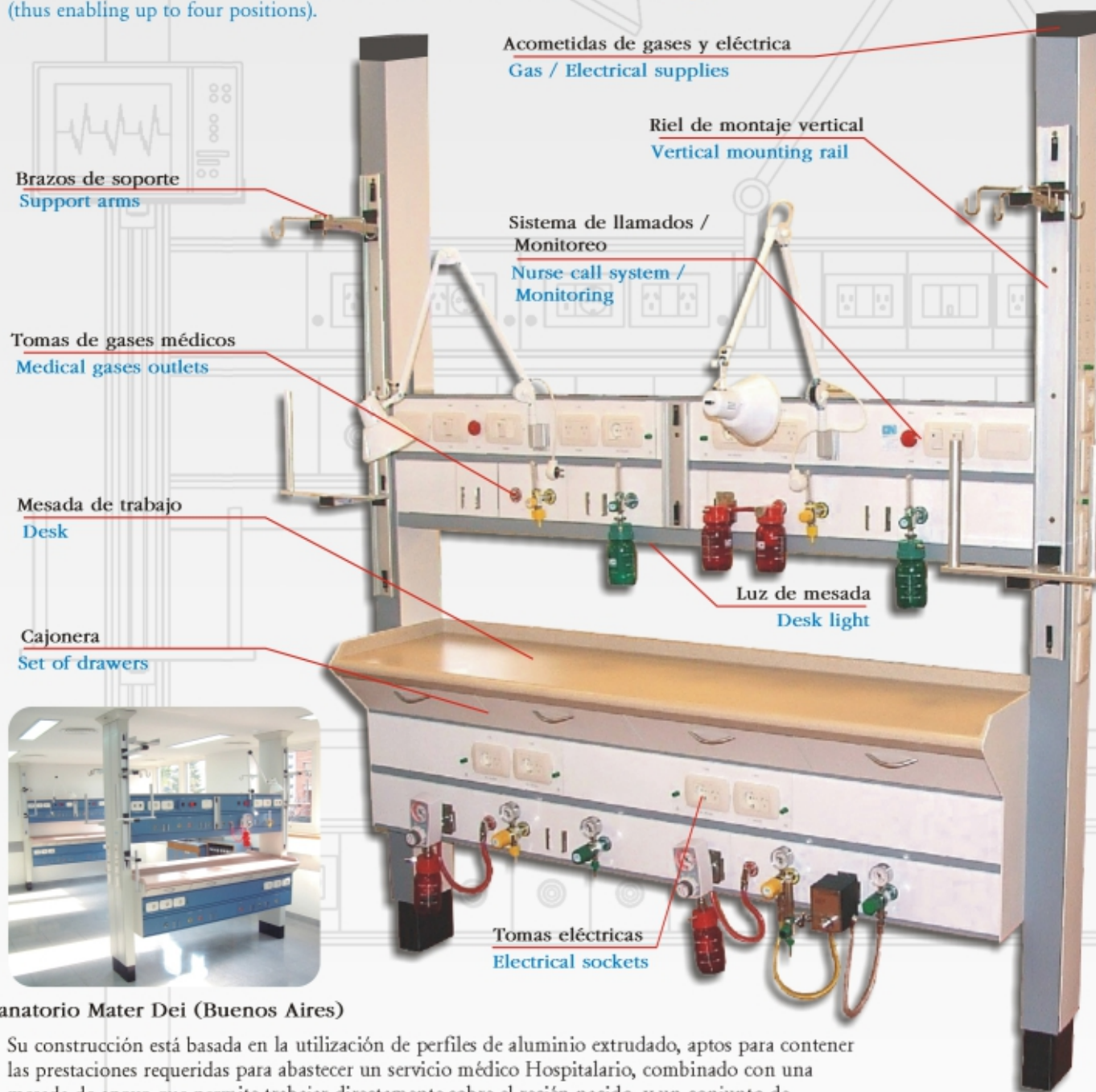

Sanatorio Mater Dei (Buenos Aires)

Su construcción está basada en la utilización de perfiles de aluminio extrudado, aptos para contener las prestaciones requeridas para abastecer un servicio médico Hospitalario, combinado con una mesada de apoyo que permite trabajar directamente sobre el recién nacido, y un conjunto de accesorios para organización del tipo de montaje múltiple "Polymount".

Its construction is based on extruded aluminum frames, fit to handle provisions requested to supply a Hospital medical service, combined with a desk that allows to work directly on the newly-born, as well as a set of organization accessories of the multiple assembly "Polymount" type.

Especificaciones Técnicas

- Mesada construida en laminado de minerales naturales y polímero acrílico puro, Corian® (marca registrada Dupont).
- Cajonera revestida con laminado plástico.
- Riel de montaje múltiple en aluminio con terminación superficial de tipo anodizado natural satinado.

Technical Features

- Desk built in natural mineral plates and pure acrylic polymer or granite.
- Set of drawers with laminated plastic.
- Multiple aluminum mounting rail with an anodized superficial termination.
- IV bags and Infusion pumps supports, Monitor brackets, etc.